


LAPAROSCOPIC SURGERY

AESCULAP[®] ADTEC[®] NEEDLE HOLDER

AESCULAP® ADTEC® NEEDLE HOLDER





With these needle holders AESCULAP® offers a range of instruments specially developed for suturing and knotting. The axial handle allows the instruments to be rotated very easily.

- Specific grip on curved and straight needles; grip on the suture thread.
- An integrated overload protection keeps the holding force of the jaw parts constant. Thus, damage to the needle holder, as well as the needle, can be reduced.
- Simple lock with just two fixed positions following the push ballpoint principle. The needle can thus be gripped with the lock either engaged or released.
- Versatile needle holders available in different diameters and lengths.
- All DUROGRIP needle holders with tungsten carbide inserts in jaw parts (except PL406R and PL414R).

Mit diesen Nadelhaltern bietet AESCULAP® ein speziell zum Nähen und Knoten entwickeltes Instrumentarium an. Durch den axialen Handgriff können die Instrumente sehr einfach rotiert werden.

- Gezieltes Fassen von gebogenen und geraden Nadeln sowie Greifen des Fadens.
- Durch die integrierte Überlastsicherung wird die Haltekraft der Maulteile konstant gehalten. Dadurch kann eine Beschädigung des Nadelhalters als auch der Nadel reduziert werden.
- Einfache Sperre mit nur zwei Rastpositionen nach dem Kugelschreiberprinzip. Die Nadel kann somit mit arretierter und gelöster Sperre gefasst werden.
- Vielfältig einsetzbare Nadelhalter, die in unterschiedlichen Durchmessern und Längen verfügbar sind.
- Alle DUROGRIP Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen in den Maulteilen (mit Ausnahme von PL406R und PL414R).

AESCULAP® ADTEC® NEEDLE HOLDER




Description Beschreibung	Diameter Durchmesser	Length Länge		Catalog number Artikelnummer
DUROGRIP Needle holder straight	3.5 mm	200 mm		PL419R
Nadelhalter gerade	3.5 mm	290 mm		PL418R
	5 mm	310 mm		PL407R
	5 mm	370 mm		PL404R
	5 mm	420 mm		PL416R
DUROGRIP Needle holder curved left	5 mm	310 mm		PL408R
Nadelhalter links gebogen	5 mm	370 mm		PL405R
	5 mm	420 mm		PL417R
DUROGRIP Needle holder curved right	5 mm	310 mm		PL413R
Nadelhalter rechts gebogen	5 mm	370 mm		PL415R
DUROGRIP Assist. needle holder, 2 x 3 teeth	5 mm	310 mm		PL409R
Assist. Nadelhalter, 2 x 3 Zähne			1:1	



AESCULAP® ADTEC® NEEDLE HOLDER



Description Beschreibung	Diameter Durchmesser	Length Länge		Catalog number Artikelnummer
SUPER-righting needle holder Selbstaufrechtender Nadelhalter	5 mm	310 mm		PL414R


1:1

SUPER-righting needle holder.

Allows automatic upright positioning of the needle at different angles to the instrument shaft.

Selbstaufrechtender Nadelhalter.

Ermöglicht das selbsttätige Aufrichten der Nadel in unterschiedlichen Winkelstellungen zum Instrumentenschaft.

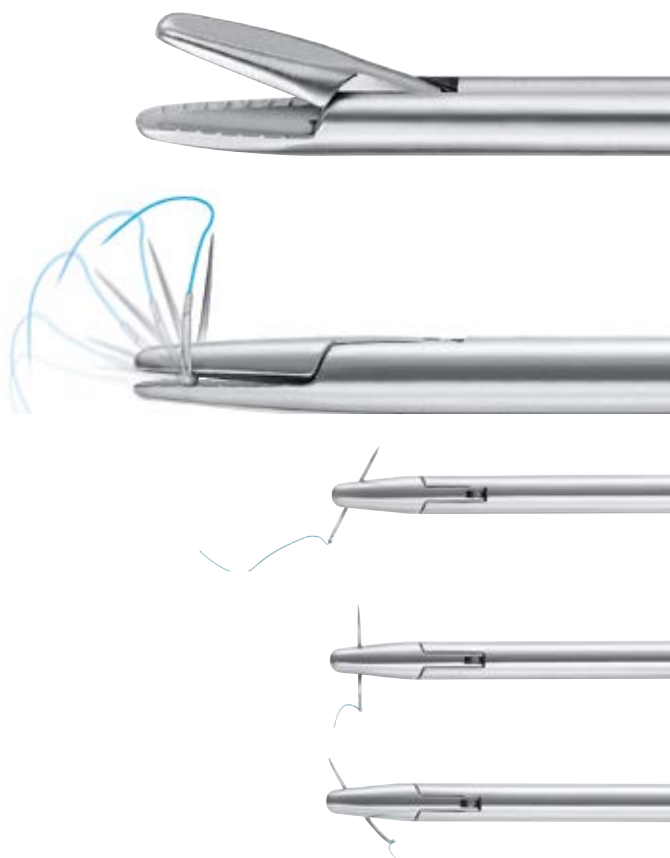

Additional instrument with same handle

Zusätzliches Instrument mit gleichem Handgriff

Description Beschreibung	Diameter Durchmesser	Length Länge		Catalog number Artikelnummer
Anvil Grasper Anlegezange für Gegendruckplatte eines Circular-Staplers	10 mm	370 mm		PL406R

1:1

AESCULAP[®] – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany

Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-2600 | www.aesculap.com

The main product trademark "Aesculap" and the product trademark "ADTEC" are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.