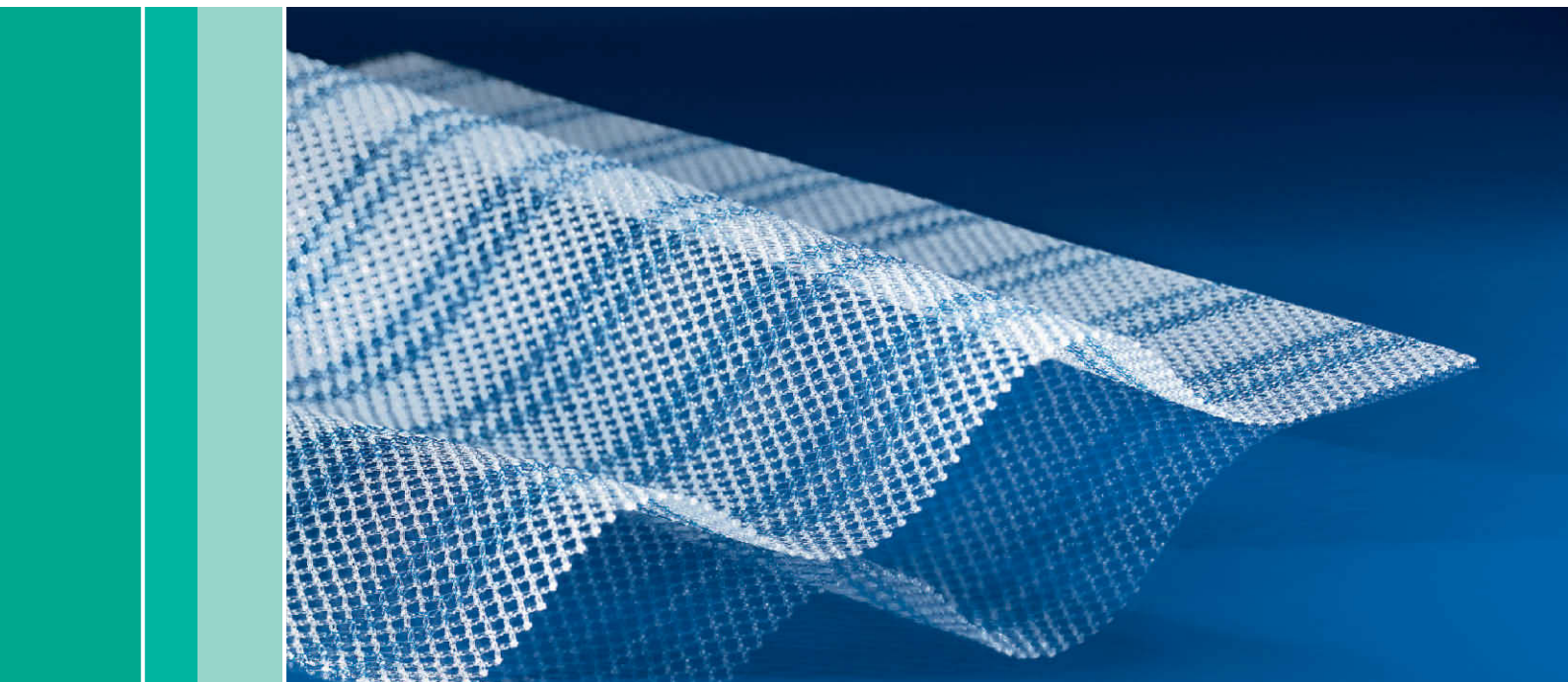


Optilene® Mesh

Netz zur Reparatur von Narben- und Leistenhernien

Universell einsetzbares Herniennetz aus Polypropylen mit blauen Entfaltungslinien

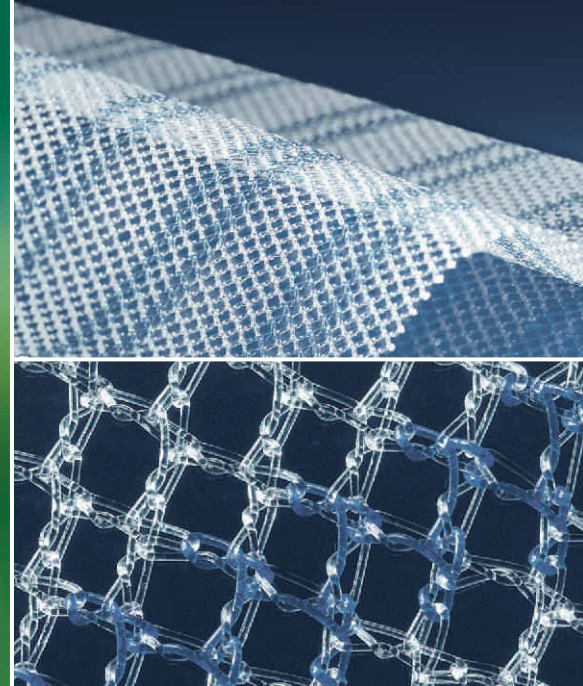
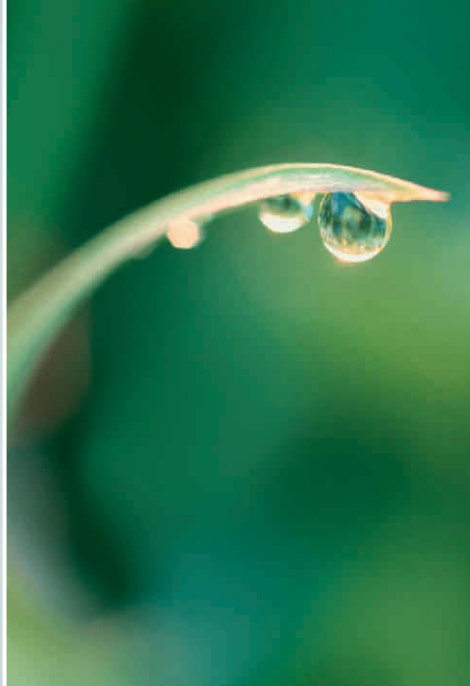


Hernia Repair

Optilene® Mesh

Netz zur Reparatur von Narben- und Leistenhernien

Optilene® Mesh kombiniert Gewichtsreduktion und exzellente Handlingeigenschaften. Das weiche, großporige und elastische Netz bietet gleichzeitig größtmögliche Stabilität und hervorragende Entfaltungseigenschaften.



Universell & leicht

- **Universell und leicht**
gewichtsreduziertes Netz mit hervorragenden Handlingeigenschaften
- **Großporig**
unterstützt die Einheilung
- **Blaue Entfaltungslinien**
für die gezielte Platzierung
- **Homogene Elastizität**
in Längs- und Querrichtung
- **Für alle offenen Techniken in der Narbenhernienchirurgie**
 - › Onlay
 - › Sublay
- **Für alle offenen und laparoskopischen Techniken in der Leistenhernienchirurgie**
 - › Lichtenstein
 - › TEP
 - › TAPP

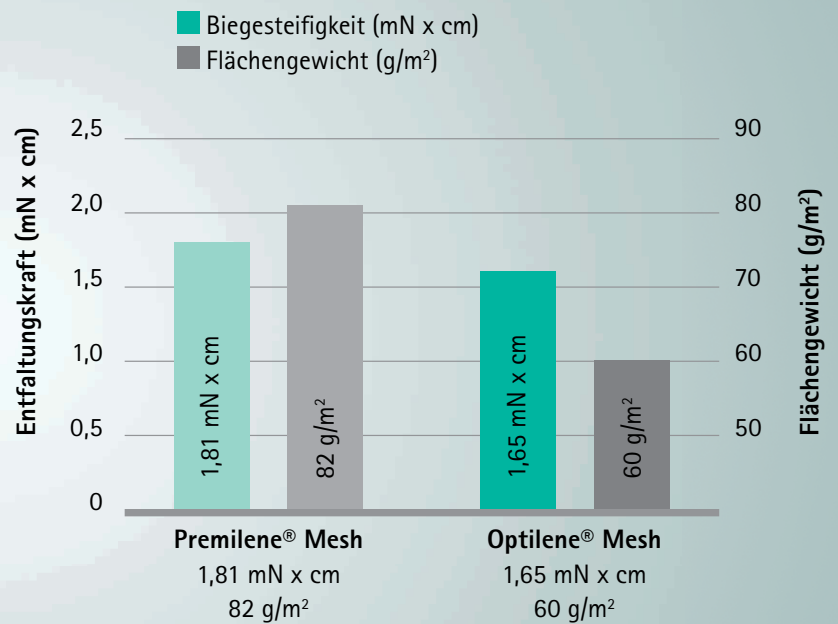
Großporig

- Die blauen Entfaltungslinien erlauben eine gezielte und einfache Netzplatzierung trotz des reduzierten Flächen Gewichts
- Die innovative Wirkstruktur bietet volle Transparenz und eine homogene Elastizität

Entfaltungseigenschaften


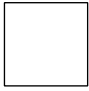

Biegesteifigkeit gemessen nach DIN 53362

Die innovative Wirkstruktur von Optilene® Mesh vereint eine erhebliche Gewichtsreduktion und hervorragende Entfaltungseigenschaften im Vergleich mit traditionellen Polypropylen-Netzen.



Produkteigenschaften

Material	Monofiles Polypropylen
Konstruktion	Gestrickt
Flächengewicht	60 g/m ²
Porengröße	1,5 mm
Stärke	0,53 mm
Indikationen	Leistenhernie Narbenhernie (Onlay-/Sublay-Technik)
Kontraindikationen	Optilene® Mesh darf nicht in kontaminiertes oder infektiöses Gewebe eingebracht oder Kindern in der Wachstumsphase implantiert werden.
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid

Artikel-Nr.	Größe	Verpackungsinhalt	
1065020	5 x 10 cm	5 Stück	
1065020UNI	5 x 10 cm	1 Stück	
1065030	7,5 x 15 cm	5 Stück	
1065030UNI	7,5 x 15 cm	1 Stück	
1065040	10 x 15 cm	5 Stück	
1065040UNI	10 x 15 cm	1 Stück	
1065160	20 x 30 cm	5 Stück	
1065160UNI	20 x 30 cm	1 Stück	
1065060	26 x 36 cm	5 Stück	
1065060UNI	26 x 36 cm	1 Stück	
<hr/>			
1065080	15 x 15 cm	5 Stück	
1065080UNI	15 x 15 cm	1 Stück	
1065090	30 x 30 cm	5 Stück	
1065090UNI	30 x 30 cm	1 Stück	
<hr/>			
1065140	4,5x 10 cm	5 Stück	
1065140UNI	4,5x 10 cm	1 Stück	
1065150	6 x 14 cm	5 Stück	
1065150UNI	6 x 14 cm	1 Stück	