

INTERVENTIONELLE
GEFÄSSDIAGNOSTIK
UND -THERAPIE

NSE™ PTA

PTA Scoring Ballonkatheter

NSE™ PTA

PTA SCORING BALLONKATHETER

NIEDRIGES EINTRITTSPROFIL UND FLEXIBLE SPITZE


- Das Spitzendesign ermöglicht einen verbesserten Läsionseintritt (1)

FLEXIBLE, FREI BEWEGLICHE ELEMENTE

- Verbesserte Zugänglichkeit in komplexen Läsionen (1)
- Ermöglichen auch in stark gewundenen Gefäßen eine gute Gefäßgängigkeit (2)

DREIKANTIGE NYLONELEMENTE

- Stabilisieren den Ballon während der Inflation (2)
- Ermöglichen einen effektiven Scoring-Effekt aufgrund der hoch konzentrierten Kraftübertragung (3)

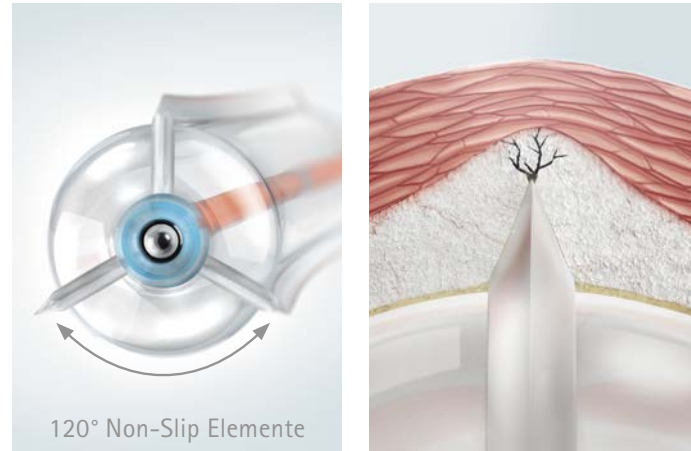

NSE™ PTA

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	Ballondurchmesser / Ballonlänge	Nominaldruck (atm) (4)	Rated burst pressure (atm) (4)	Schaftlänge	Schleusenkompatibilität (F)
NW18-05040040	4.00 mm / 40 mm	8 atm	18 atm	50 cm	5 F
NW18-05050040	5.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		6 F
NW18-05060040	6.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		5 F
NW18-09040040	4.00 mm / 40 mm	8 atm	18 atm	90 cm	5 F
NW18-09050040	5.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		6 F
NW18-09060040	6.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		5 F
NW18-09070040	7.00 mm / 40 mm	8 atm	14 atm	145 cm	5 F
NW18-14540040	4.00 mm / 40 mm	8 atm	18 atm		6 F
NW18-14550040	5.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		5 F
NW18-14560040	6.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		6 F
NW18-14570040	7.00 mm / 40 mm	8 atm	14 atm		


1 Data on file at GOODMAN Co. Ltd.

2 Taguchi I et al. Journal of Cardiology 2014;63:19-23.

3 Ashida K et al. J Invasive Cardiol. 2013 Oct;25(10):555-64. PMID: 24088433.

4 Einzelheiten können Sie der Compliance-Tabelle entnehmen.

KATHETER-DESIGN

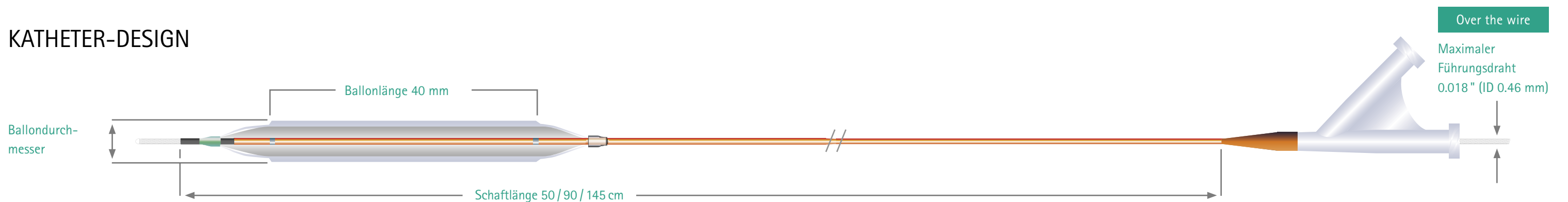

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Berlin | Sieversufer 8 | 12359 Berlin

Hersteller nach MDD 93/42/EWG:

NSE PTA wird hergestellt von Goodman Co., Ltd. (eine Tochtergesellschaft der NIPRO Corporation)

Die Produktmarke „NSE“ ist eine eingetragene Marke von Goodman Co., Ltd.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.